


LASER FRAX

Indications	- Rides et ridules (photorajeunissement) - Pores dilatés - Cicatrices
Contre-indications	Cf. contre-indications laser
Effets indésirables	- Réaction allergique - Brûlure - « Petits boutons blancs »
Consignes pré-traitement	- Éviction solaire : 2 semaines - Éviter d'appliquer tout produit cosmétique le jour de la séance (crème, maquillage, etc.)
Consignes post-traitement	- Eviction solaire jusqu'à disparition de l'érythème (1 semaine environ) - Appliquer une crème réparatrice et une crème solaire SPF50+ jusqu'à disparition de l'érythème - Possibilité de se maquiller
Résultat	- ENDPOINT : légers érythème et pétéchies → Prévenir le patient (montrer la photo du livret de paramétrages Lutronic) - Premières améliorations après 28 jours (renouvellement cellulaire de la peau) - Amélioration possible jusqu'à 6 mois après la dernière séance

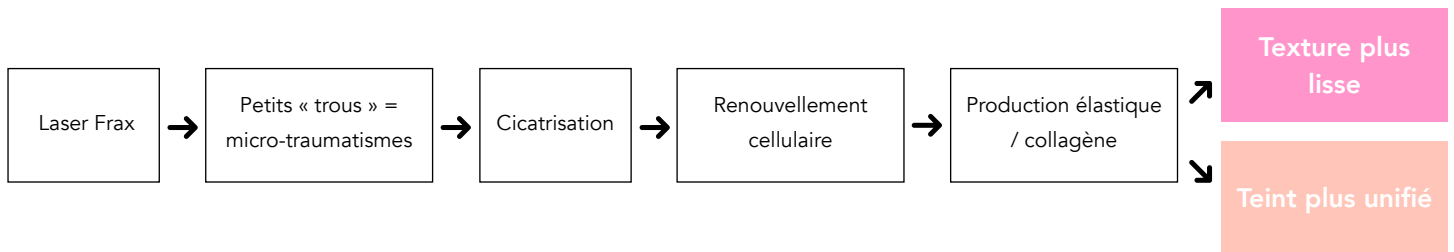

DÉROULEMENT

- Prendre une photo de la zone à traiter avec l'accord du patient
- Nettoyer la zone avec des compresses imbibées d'eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement avec une compresse
- **Mettre les coques de protection au patient** et porter les lunettes de protection adaptée à la longue d'onde utilisée

LUNETTES DE PROTECTION :



PIÈCE À MAIN : PAM MLA (Microlens Array)



CICATRICES

Étape	Longueur d'ondes (nm)	Zone	Step	Spot (mm)	Fluence (J/cm2)	Hz	Nombre de passages*	Endpoint	Nombre de séances	Intervalle
1	1064 Q4	Visage ou corps	3	8	Phototype I - IV 2 - 2,8**	5 - 10	2 - 3	Léger érythème	4 - 5	2 - 3 semaines
					Phototype V - VI 2	5				
2	1064 QS	Cicatrices	1	4	Phototype I - IV 2 - 2,8**	2 - 5	2 - 3	Légers pétéchies	4 - 5	Cicatrices profondes : 4 semaines
					Phototype V - VI 2 - 2,4**					

PORES DILATÉS

Étape	Mode	Zone	Step	Taille de spot	Fluence (J/cm2)	Hz	Nombre de passages*	Endpoint	Nombre de séances	Intervalle
1	1064 Q4	Visage	3	8	2	5 - 10	2 - 3	Léger érythème	4 - 5	2 - 3 semaines
2	1064 QS	Visage	1	8	0,45 - 0,6	5 - 10	2 - 3	Légers pétéchies		
3	1064 QS	Pores dilatés	1	8	0,9 - 1	5 - 10	2 - 3			

SI CICATRICES + PORES DILATÉS : PROTOCOLE CICATRICES + ÉTAPE 3 PORES DILATÉS

PHOTORAJEUNISSEMENT

Étape	Mode	Zone	Pièce à main	Taille de spot	Fluence (J/cm2)	Hz	Nombre de passages*	Endpoint	Nombre de séances	Intervalle
1	1064 Q4	Visage / Cou	3	8	2	5 - 10	2 - 3	Léger érythème	4 - 5	2 - 3 semaines
2	1064 QS	Visage / Cou	1	8	0,45	5 - 10	2 - 3	Légers pétéchies		

* Possibilité de faire 1 à 2 passages supplémentaires (phototype I - IV)

** Augmenter progressivement la fluence jusqu'à obtention du endpoint

- Appliquer une crème solaire réparatrice