

Hollywood Peel est un peeling superficiel indolore combinant l'utilisation d'une lotion de carbone et du laser Hollywood Spectra. Il permet d'unifier le teint, resserrer les pores dilatés, réguler le sébum et purifier la peau sans l'agresser.

Indications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coup d'éclat pour un évènement</li> <li>Amélioration de la qualité de la peau (texture, teint)</li> </ul>
Phototypes	I à VI
Nombre de séances	1 à 6
Intervalle	2 à 4 semaines
Contre-indications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cf. contre-indications laser (hormis l'éviction solaire)</li> <li>Bronzage prononcé ou coup de soleil</li> <li>Mélasma</li> </ul>
Consignes pré-traitement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éviter de s'exposer au soleil et aux UV artificiels 2 semaines avant la séance</li> <li>Appliquer une crème solaire SPF 50+ 2 semaines avant la séance</li> <li>Éviter d'appliquer tout produit cosmétique le jour de la séance (crème, maquillage, etc.)</li> </ul>
Consignes post-traitement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas frotter ni gratter la zone traitée</li> <li>Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels jusqu'à disparition de l'érythème</li> <li>Appliquer une crème solaire SPF 50+ pendant 72h</li> <li>Appliquer une crème réparatrice pendant 72h</li> <li>Il est possible de se maquiller immédiatement après le soin</li> </ul>
Effets indésirables	Léger érythème

### DÉROULEMENT

- Positionner l'aspirateur de fumée à proximité
- Nettoyer le visage avec des compresses imbibées d'eau micellaire puis sécher
- Agiter puis verser la lotion **Spectra Lotion** dans une cupule



- Appliquer la lotion au **pinceau** en couche fine et homogène à une distance de 0,5 cm du rebord orbitaire, des cheveux, des sourcils et des éventuels maquillages semi-permanents ou tatouages
- Tamponner délicatement avec une compresse

Temps de pose : **5 minutes**

- Mettre les coques de protection au patient** et porter les lunettes de protection adaptées à la longueur d'onde utilisée

LUNETTES DE PROTECTION :



PIÈCE À MAIN : PAM Zoom Collimatée



Étape	Aspiration	Longueur d'ondes (nm)	Zones	Step	Spot (nm)	Fluence (J/cm2)	Hz	Nombre de passages	Endpoint
1		1064 Spectra	Visage	3	8	0,8	5	1	

L'étape 1 ne détruit pas les particules de carbone. Une légère fumée peut se dégager lors du passage.


- Prévenir le patient du « bruit sourd » du tir laser (étape 2)

2	Réglage minimal	<b>1064 QS</b>	Visage	1	8	1	5 - 10	2 - 3	Tir inaudible = toutes les particules de carbone ont été éliminées
---	-----------------	----------------	--------	---	---	---	--------	-------	---

- Nettoyer la pièce à main des particules de carbone avec une compresse imbibée d'alcool à 90°

3		1064 Spectra	Zone T Pores dilatés Acné	1	8	1,5 - 2,6	10	2 - 3	
---	--	--------------	---------------------------------	---	---	-----------	----	-------	--

- Retirer les résidus de lotion avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher  
⚠ Ne jamais retirer avec de l'alcool
- Appliquer une crème solaire réparatrice

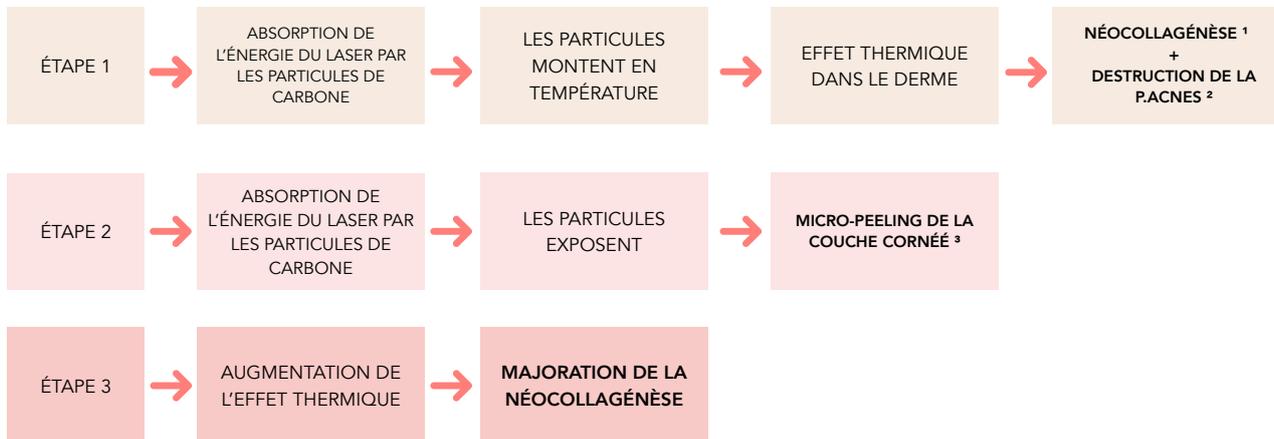

<sup>1</sup> Néocollagène : Processus de formation du nouveau collagène

<sup>2</sup> P. Acnes (Cutibacterium acnes) : Bactérie participant au développement de l'acné

<sup>3</sup> Couche cornée : Partie la plus externe de l'épiderme