

Hollywood Peel est un peeling superficiel indolore combinant l'utilisation d'une lotion de carbone et du laser Hollywood Spectra. Il permet d'unifier le teint, resserrer les pores dilatés, réguler le sébum et purifier la peau sans l'agresser.

Indications	<ul style="list-style-type: none"> • Coup d'éclat pour un évènement • Amélioration de la qualité de la peau (texture / teint)
Phototypes	I à VI
Nombre de séances	1 à 6
Intervalle	2 à 4 semaines
Contre-indications	<p>Cf. CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES + LASER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coup de soleil ou bronzage prononcé
Consignes pré-traitement	<ul style="list-style-type: none"> - Éviter de s'exposer au soleil et aux UV artificiels minimum 2 semaines avant - Appliquer une crème solaire SPF 50+ chaque matin puis toutes les deux heures en cas d'exposition 2 semaines avant - Éviter d'appliquer tout produit cosmétique (crème, maquillage, etc.) sur la zone à traiter le jour de la séance
Consignes post-traitement	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas frotter ni gratter la zone traitée - Ne pas retirer la peau qui pèle - Appliquer une crème réparatrice 1 à 2 fois par jour jusqu'à disparition complète des signes d'irritation (rougeur, chaleur, etc.) - Il est possible de se maquiller immédiatement après la séance - Ne pas épiler ou raser la zone traitée jusqu'à disparition complète des signes d'irritation - Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels jusqu'à disparition complète des signes d'irritation - Appliquer une crème solaire SPF 50+ chaque matin puis toutes les deux heures en cas d'exposition - Éviter de pratiquer une activité physique durant 3 jours - Ne pas se rendre à la piscine, au hammam ou dans un sauna durant 3 jours - Ne pas appliquer de produits cosmétiques exfoliants (acides ou grains) ou à base d'alcool, de parfum, d'huiles essentielles, de rétinoïdes ou de vitamine C sur la zone traitée durant 1 semaine - Ne faire aucun autre soin à domicile ou en institut (ex : gommage, extraction des comédons) sur la zone traitée durant 1 semaine - Ne pas faire d'injections (acide hyaluronique / botox) sur la zone traitée durant 2 semaines - Ne pas faire de traitement laser ou par EBD sur la zone traitée durant 3 semaines
Effets indésirables	<ul style="list-style-type: none"> - Érythème - Œdème - Sensation de chaleur - Desquamation - Pustules (petits boutons blancs) - Hyperpigmentation post-inflammatoire

DÉROULEMENT

- Positionner l'aspirateur de fumée à proximité
- Nettoyer le visage avec des compresses imbibées d'eau micellaire puis sécher
- Agiter puis verser la lotion **Spectra Lotion** dans une cupule



- Appliquer la lotion au **pinceau** en couche fine et homogène à une distance de 0,5 cm du rebord orbitaire, des cheveux, des sourcils et des éventuels maquillages semi-permanents ou tatouages
- Tamponner délicatement avec une compresse



Temps de pose : **5 minutes**

- Mettre les coques de protection au patient** et porter les lunettes de protection adaptées à la longueur d'onde utilisée

LUNETTES DE PROTECTION



PIÈCE À MAIN : PAM Zoom Collimatée



Étape	Aspiration	Longueur d'ondes (nm)	Zone	Spot (mm)	Fluence (J/cm²)	Fréquence (Hz)	Nombre de passages	Endpoint
1		1064 Spectra	Visage	8	0,8	5	1	

L'étape 1 ne détruit pas les particules de carbone. Une légère fumée peut se dégager lors du passage.


- Prévenir le patient du « bruit sourd » du tir laser (étape 2)

2	Réglage minimal	1064 QS	Visage	8	1	5 - 10	2 - 3	Tir inaudible = toutes les particules de carbone ont été éliminées
---	-----------------	----------------	--------	---	---	--------	-------	---

- Nettoyer la pièce à main des particules de carbone avec une compresse imbibée d'alcool à 90°

3		1064 Spectra	Zone T Pores dilatés Acné	8	1,5 - 2,6	10	2 - 3	
---	--	--------------	---------------------------------	---	-----------	----	-------	--

- Retirer les résidus de lotion avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher
⚠ Ne jamais retirer avec de l'alcool
- Appliquer une crème solaire réparatrice (Uriage® - Bariéderm Cica SPF50+)

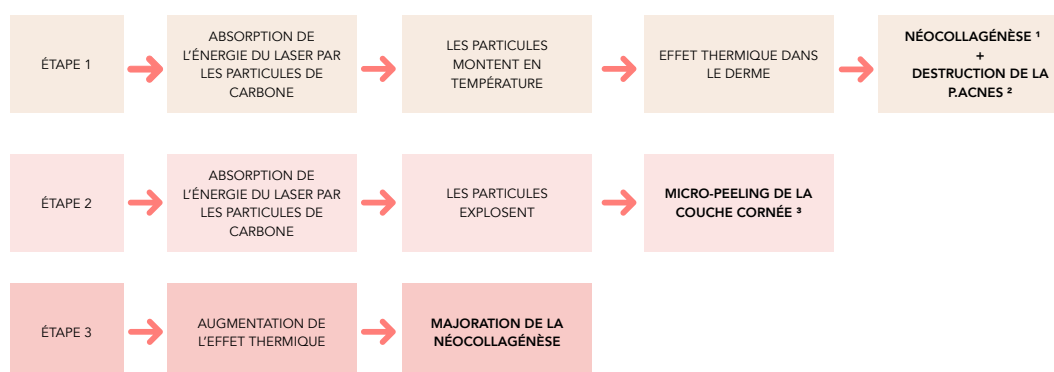

¹ Néocollagène : Processus de formation du nouveau collagène

² P. Acnes (Cutibacterium acnes) : Bactérie participant au développement de l'acné

³ Couche cornée : Partie la plus externe de l'épiderme